

HURTIG START GUIDE



1

SCAN TSU-BOKSE

Brug Semex Solutions-appen eller indtast manuelt TSU-boks i systemet via menuen 'TSU til ko.'



2

LINK DNA-PRØVERNE

Fra listen 'TSU til ko' skal du linke den korrekte TSU til det dyr, som du tager en ørebiopsi fra.



3

TAGE EN PRØVE FRA KASSEN

Tag et rør ud af æsken.



4

PLACER RØRET I PRØVE TANGEN

Placer TSU'en i trådskeereren med perforatoren mod håndtaget og den røde klips opad. Luk låsemekanismen for at sikre TSU'en.



5

LÅS


Klem forsigtigt håndtaget på prøvetangen, indtil hulstansen låses på plads.



6

FJERN SIKKERHEDSKLEMMEN

Slip håndtagene og fjern den røde plastikclips, der beskytter hulstansen. Prøvetangen er nu klar til brug.

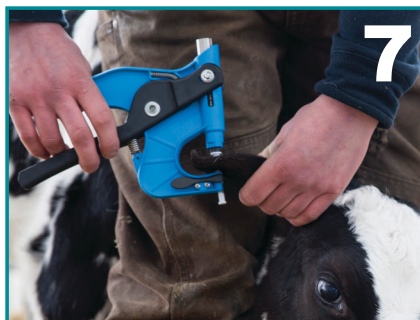

7

TAGE ØREBIOPSIEN

Klem håndtagene jævnt sammen og slip dem for at tage en prøve. Ørebiopsier bør ikke tages for tæt på siden af øret, hovedet eller større blodkar. Øret og prøve tangen må ikke komme i kontakt med blod, gødning eller slim under udtagelse.



8

TJEK ØREBIOPSIEN

Kontroller, at TSU'en har en grøn indikator på enden af røret og en synlig mængde væv. Kassér alle rør, der er utætte, beskadigede, eller hvis væv ikke er helt inde i røret.



9

FJERN HULSTANSEN

Træk håndtagene fra hinanden for at fjerne engangskniven.



10

AT INDGIVE EN ANMODNING

Læg ørebiopsierne i en plastikpose, mærk posen med app ordrenummer, firmanavn og dato. Flere ordrer kan ikke placeres i samme pose, men flere poser kan sendes sammen.